

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Микроскоп цифровой Inskam 316 (Wi-Fi, 1080 P, 1000 крат)



СОДЕРЖАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	3
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ФУНКЦИИ ПРОДУКТА.....	4
Инструкции по использованию для пользователей (мобильного телефона)	5
Инструкции по применению (для пользователей Windows)	7
Инструкции по применению (пользователи Mac)	7
ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ	8
Индикатор зарядки.....	8
Индикаторная лампа	9
ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА	9

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед использованием микроскопа снимите пластиковую крышку крышки светодиодной лампы и закройте ее после использования, чтобы предотвратить попадание пыли.
2. Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед его первым использованием. Пожалуйста, не передавайте напрямую ПК. Терминальная зарядка, пожалуйста, выберите адаптер 5V 1A
3. Лучшее фокусное расстояние для микроскопии составляет 0-40 мм, вам нужно отрегулировать фокусировку, отрегулировав колесо фокусировки, которое достигло наиболее четкого состояния.
4. Соединение WIFI доступно только для вашего телефона. и планшет, не для ПК. Если вы хотите использовать его на ПК, подключите его через USB-кабель и загрузите нужное программное обеспечение для компьютера.
5. Пожалуйста, закройте неиспользуемое приложение в вашем телефоне, чтобы убедиться, что наш микроскоп работает без сбоев, и он не застрянет.
6. Не чистите микроскоп спиртосодержащими органическими растворителями
7. Не разбирайте цифровой микроскоп и не меняйте внутренние детали, это может привести к повреждению.
- 8 Не прикасайтесь к объективу пальцами.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку нашего цифрового микроскопа WiFi, этот продукт может быть легко использован в различных областях, в том числе:


- 1.Текстиль промышленный для текстильного контроля
2. Полиграфический контроль
3. Промышленный контроль: печатная плата, прецизионное оборудование
4. Образование
5. Волосы осмотр
6. Осмотр кожи

7. Микробиологическое наблюдение
8. Осмотр ювелирных изделий и монет (коллекций)
9. Визуальная помощь
10. Другое

Это портативный электронный микроскоп WiFi, оборудованный точкой доступа WiFi, который может подключаться к телефонам и планшетам системы OSIAAndroid.

В то же время Микроскоп также поддерживает интерфейс USB для подключения к компьютеру. Чем больше экран, тем лучше дисплей и четче качество изображения. В то же время продукт поддерживает хранение фотографий, видео и файлов.

ФУНКЦИИ ПРОДУКТА

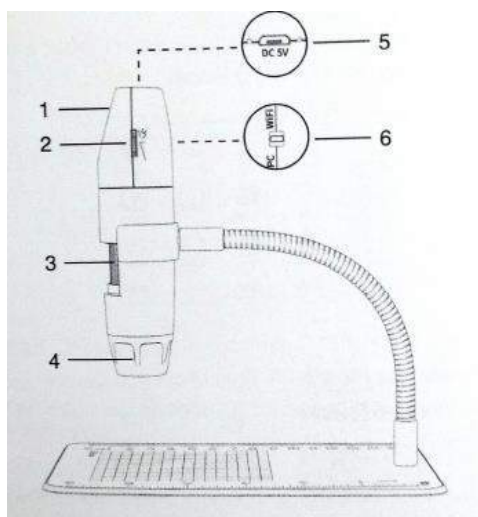

- 1 Кнопка камеры
- 2 Регулировка яркости
- 3 Колесо увеличения фокусировки
- 4 Абажур
- 5 Интерфейс зарядки
- 6 Переключение режима WiFi / режима ПК

Инструкции по использованию для пользователей (мобильного телефона)

1. Загрузка и установка приложения APP iOS

Выполните поиск «*inskam install*», затем используйте продукт в App Store для загрузки.

Android (международный):

найдите «*inskam*» в Google Play или перейдите по ссылке ниже

(www.inskam.com/download/inskam1.apk) для загрузки и установки **Android**

(Китай):

используйте мобильный браузер для сканирования следующего QR-кода, чтобы загрузить и установить приложение.

2. Подключите устройство


- a. Нажмите кнопку переключения WiFi / PC на терминале WiFi, чтобы активировать состояние WiFi устройства.
- b. Нажмите и удерживайте кнопку переключения фотокамеры в течение 3 секунд, чтобы индикатор устройства мигал синим цветом.

3. Соединение WiFi

Откройте область настроек WiFi в настройках телефона и найдите точку доступа WiFi (без пароля) с именем *inskam316-x00c*. Нажмите на соединение. После успешного подключения вернитесь в *inskam* для использования устройства (после успешного подключения WiFi синий индикатор перестает мигать и находится в устойчивом состоянии).

4. Фокусное расстояние и регулировка освещения


В состоянии съемки или записи, медленно поворачивайте колесико фокусировки, чтобы отрегулировать фокусировку, сфокусироваться на объекте и отрегулировать яркость светодиодов для достижения максимально четкого состояния просмотра.

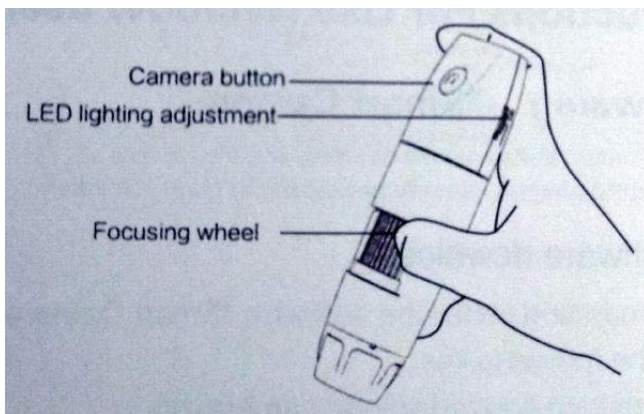

1. Кнопка камеры
2. Регулировка светодиодного освещения
3. Фокусирующее колесо

4. Внедрение и использование интерфейса мобильного приложения.

Откройте приложение, вы можете делать фотографии, видео, просмотр файлов, вращение, настройки разрешения и т. д.

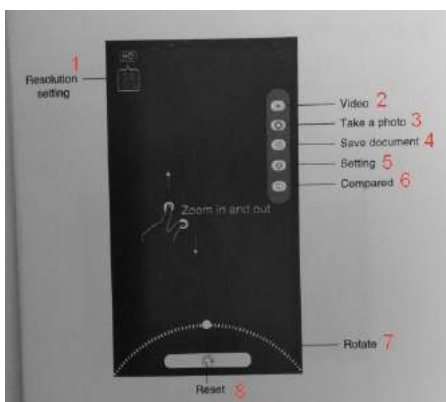

1. Настройка разрешения
2. Видео
3. Фото
4. Сохранённые документы
5. Установка
6. Сравнение
7. Поворот
8. Сброс

Инструкции по применению (для пользователей Windows)

Важно: Для вашего удобства доступны следующие два программного обеспечения.

Программное обеспечение 1: «Умная камера»


Кнопка камеры не может быть использована, а функция записи камеры может быть реализована только через программное обеспечение

1. Загрузка программного обеспечения

Загрузите и установите программное обеспечение по ссылке ниже «Smart Camera»: www.inskam.com/download/camera.zip

2. Подключение устройства

- a. Подключите USB-порт камеры к компьютеру, индикатор горит, запустите «Smart Camera
- b. Переключитесь и выберите камеру « inskam3XX » в устройстве, нажав на опцию устройства в настройках, готовую к использованию.

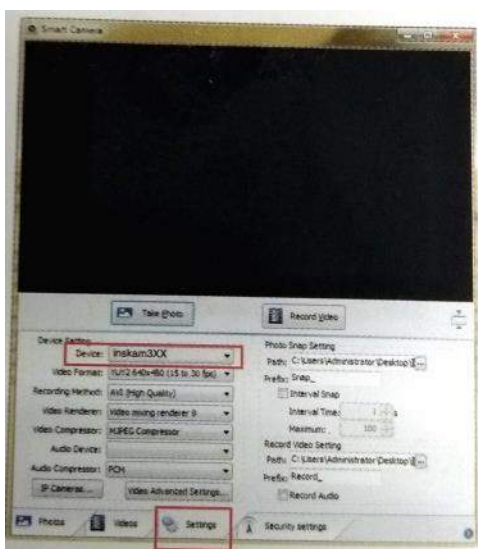

Инструкции по применению (пользователи Mac)

Кнопка камеры устройства может использоваться, и программное обеспечение должно создавать новую папку при записи видео


A. В каталоге «Applications» окна Finder найдите приложение под названием Photo Booth.



В. Переместите кнопку переключения WIFUPC на ПК, включите состояние ПК на устройстве, нажмите и удерживайте кнопку фото / переключателя устройства в течение 3 секунд и включите устройство

С. Используйте кабель для передачи данных, чтобы подключить устройство к терминалу компьютера и запустить "Photo Booth"

Д. Нажмите Photo Booth и выберите камеру "USB CAMERA"

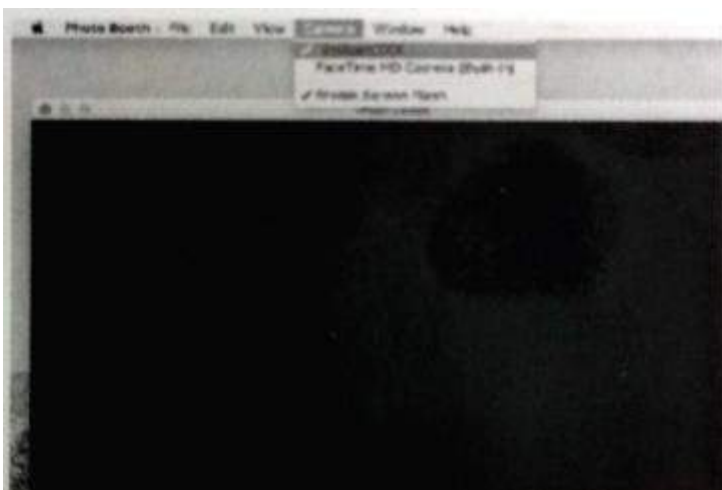

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ

Индикатор зарядки

1. Когда аккумулятор разряжен, подключите зарядное устройство для зарядки устройства. Не рекомендуется использовать устройство во время процесса зарядки (срок службы батареи устройства будет сокращен).
2. Не используйте компьютер для зарядки устройства.
3. Аккумулятор, предназначенный для этого продукта, - это литий-полимерная батарея емкостью 500 мА емкость. Его можно использовать

непрерывно в течение примерно 1,5 часов при полной зарядке, а процесс зарядки занимает 1,5 часа.

Индикаторная лампа

1. Красный индикатор горит при зарядке, а красный индикатор гаснет при полном заряде.
2. После работы устройства синий индикатор свет мигает. После успешного подключения WiFi синий индикатор всегда горит.
3. В разряженном состоянии синий индикатор медленно мигает, а затем гаснет.

ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА

Качество	2.0 Мп
Параметры продукта	50-1000 X
Разрешение	1920x1080P
Фокусное расстояние	Ручная фокусировка (0-40 мм)
Формат изображения	JPG
Формат видео	MP4 / AVI
Тип интерфейса	USB 2.0
Usb система поддержки	Android 4.2 iOS 9.0 Windows Vista / 7/8/10, MacOS X 10.8 или выше
Список деталей	Wi-fi микроскоп 1 м. кабель для передачи данных Инструкция Кронштейн трубка

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**